



# Softima<sup>®</sup> Key

2-delig opvangsysteem met een  
unieke geleiding

# Softima® Key

## 2-delig systeem met unieke geleiding

### Een 2-delig kleefstelsel met sleutel principe

Softima® Key is een dun en flexibel 2-delig kleefstelsel met een uniek geleidingssysteem. Dit zorgt voor een precieze, eenvoudige en veilige positionering van het stoma zakje op de huidplaat. Het Softima® Key systeem is ideaal voor stomadragers die op zoek zijn naar een 2-delig systeem maar wel het draagcomfort en de flexibiliteit van een 1-delig systeem willen ervaren. Bijvoorbeeld als de huid te kwetsbaar is voor een eendelig systeem.

### Dun en flexibel kleefstelsel voor een precieze, eenvoudige en veilige positionering

De kleefring van het zakje wordt gekleefd op de vlakke flexibele flens van de bijbehorende huidplaat. Door eenvoudig het tabje in de inkeping op de huidplaat te plaatsen kan de gebruiker daarna het zakje vastkleven en zit het zakje altijd correct op de huidplaat.

### Het systeem is ook geschikt voor stomadragers die hun stoma niet kunnen zien

Door het tabje aan de huidplaat in de inkeping te steken en daarna wordt met een tabje ('sleutel') bevestigd in de inkeping ('slot') aan de onderzijde van de huidplaat. Door het zakje zachtjes aan te drukken valt de 'sleutel' in het 'slot' en worden kleeffouten vermeden.



### Huidplaat zonder harde ring voor optimaal draagcomfort

De huidplaat bestaat uit hydrocolloïd, is flexibel en bloemvormig waardoor deze goed aansluit op de contouren van het lichaam. De flens van de huidplaat is dun en zacht waardoor het voelt als een 1-delig systeem. Hurken en diep buigen kan zonder dat er een harde ring in je buik drukt.

### Vlak en convex huidplaat

De Softima® Key huidplaten zijn vlak of convex (diepte 4 mm) waarop zowel een gesloten, roll-up, leegbaar of urostomazakje kan worden gekleefd.


Een stomagordel kan in de oogjes worden geklikt voor extra fixatie en extra gevoel van zekerheid.

# Softima® Key

## Gesloten en leegbare stomazakjes met kleefkoppeling

Het zakje is van geurbestendig plastic en bekleed met een zachte non-woven laag voor meer draagcomfort op de huid van de stomadrager. Het zakje ritselt niet bij het maken van bewegingen.

De zakjes zijn voorzien van een geïntegreerd laminair (meerlaags) filter met een lange werkingduur; het verwerkingstraject is 25% langer. De filter loopt over de gehele breedte van het zakje en de gehele lengte van de filter wordt benut. Hierdoor bolt het zakje niet op. Door het geïntegreerde filter is er geen contact met de kleding en geen contact met de huid.

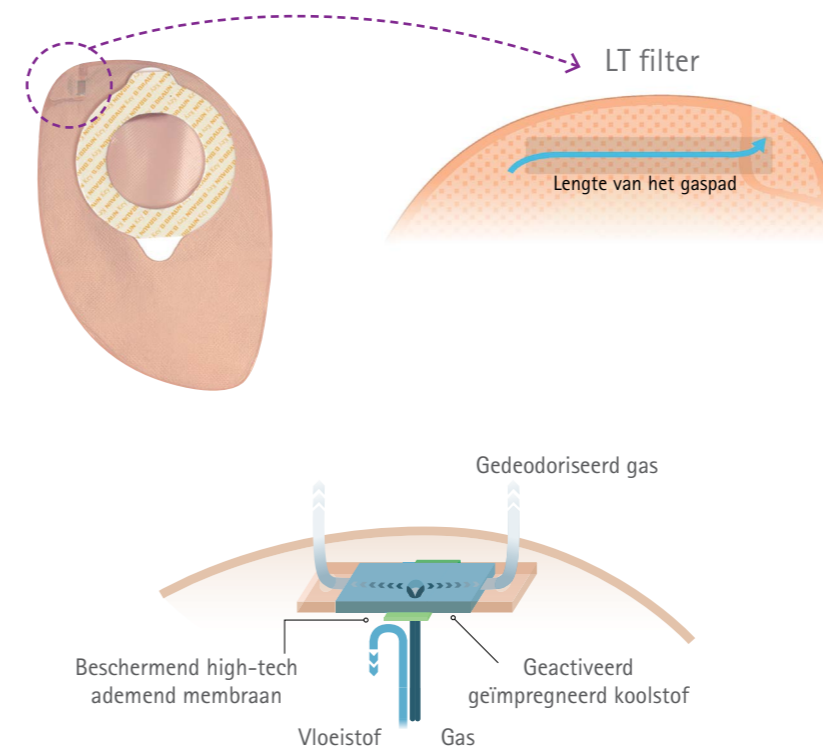

Een filtersticker voor een water- en luchtdichte afsluiting tijdens baden, douchen, zwemmen etc. wordt bijgeleverd.

Wil je ontdekken welke stoma oplossing het best bij jou past?  
Vraag dan een gratis proefpakket aan en ervaar het zelf.

[Lees hier meer](#)

# Softima® Key

Leegbare zakjes met roll'up sluiting


## Midi en Maxi uitvoering



## Handig en veilig sluitsysteem



Uitloop met een geïntegreerde klittenbandsluiting

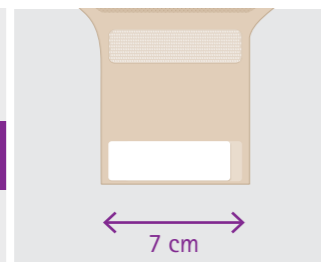

7 cm brede uitloop wat het tussentijds leegmaken vergemakkelijkt



# Softima® Key Maxi Ileo

Leegbare zakjes met dopsluiting



## Voor stomadragers met een High output stoma

Softima® Key Maxi ileo is een grote opvangzak met dopsluiting voor stomadragers met een high output stoma.

Capaciteit van het zakje is 870 ml - 930 ml, afhankelijk van de grootte van de flens.

Hygiënisch legen van de zak kan via de trechtervormige uitloop met dopsluiting met een diameter van 14 mm aan de onderzijde van de zak.

## Betere nachtrust met een Flow collector tijdens de nacht

Dit systeem met dopsluiting is veilig aan te sluiten op de Flow Collector, een opvangzak met 2 liter extra opvangcapaciteit voor tijdens de nacht. Deze oplossing in combinatie met het leegbare Softima Key high-flow zakje is ontwikkeld om de nachtrust van stomadragers met een high output stoma te verbeteren.

## Positieve feedback

Uit een in Frankrijk uitgevoerd observationeel onderzoek bij 27 patiënten met een high output stoma die de Flow Collector gebruikten, bleek dat de frequentie van het leegmaken van het zakje in 70% van de gevallen is afgenomen van eenmaal per 4 uur tot eenmaal per 24 uur.

90% van de stomadragers gaf aan dat de Flow Collector hun levenskwaliteit had verbeterd omdat het bijdroeg aan een betere ongestoorde slaap.



# Softima® Key Uro

Voor stomadragers met een urinestoma

Softima® Key Uro Midi is een opvangzakje met aftapkraantje. Het zakje heeft een anti-refluxsysteem, waardoor de urine niet terugstroomt over de huidplaat en zich verdeelt over het zakje. Hierdoor is er minder kans op lekkage.

## Eenvoudig te openen en legen


Door het draaikraantje aan de onderzijde van het zakje, is het zakje eenvoudig te openen en te legen. Het kraantje heeft een duidelijk voelbare open- en dichtstand, handig bij visusproblemen. Het antidruppelsysteem voorkomt spetteren en urine op je handen bij het legen van het zakje.



Dicht



Open

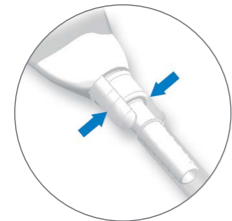

Universele verbinding



Inhoud: 2 liter

Voor de nacht kan er met een bijgeleverde universele connector een nachtopvangzak met extra opvangcapaciteit van twee liter aangesloten worden. Dit bevordert de nachtrust. De universele verbinding draait mee met de bewegingen van de stomadrager waardoor de slang niet afknelt.

# Assortiment

Softima® Key huidplaat - 10 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
63040K	15059154	40/15-35 ✂
63050K	15059170	50/15-45 ✂
63060K	15059189	60/15-55 ✂
63080K	15180417	80/15-75 ✂

✂ Uitknipbaar

Softima® Key convex huidplaat - 5 stuks per verpakking

Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)
63052K	15233014	50/15-25 ✂
63062K	15233030	60/15-35 ✂
63063K	15233049	60/15-45 ✂
63064K	15233057	60/25
63066K	15233065	60/30
63067K	15233073	60/35
63069K	15233081	60/40

✂ Uitknipbaar

Softima® Key gesloten zakje - 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi	63140K	15058883	40	●
± 450 ml	63150K	15058948	50	●
	63160K	15058964	60	●
	63180K	15180395	80	●

Softima® Key leegbaar zakje Roll'Up - 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi	631241K	15399656	40	●
± 525 - 550 ml	631251K	15399672	50	●
	631240K	15399648	40	○
	631250K	15399664	50	○
	631261K	15399699	60	●
± 610 - 670 ml	631281K	15399710	80	●
	631260K	15399680	60	○
	631280K	15399702	80	○

○ Transparent

Softima® Key leegbaar zakje High flow – 30 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Maxi	63550K	15059251	50	●
± 720 ml	63560K	15059278	60	●
	63680K	15180506	80	○

○ Transparent

Flow Collector High output

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Verpakkingseenheid
2000 ml	039901K	15196291	5 stuks
	039900K	15009181	15 stuks

Softima® Key urozakje – 20 stuks per verpakking

Maat	Artikelnummer	Z-indexnummer	Ø (mm)	Kleur
Midi	63740K	15421716	40	●
± 575 ml	63750K	15421724	50	●
	63760K	15241732	60	●
	63840K	15241740	40	○
	63850K	15421759	50	○
	63860K	15421767	60	○

○ Transparent

Urimed® Plus urine nachtzak

Artikelnummer	Z-indexnummer	Lengte slang	Verpakkingseenheid
28300A	15826236	120 cm	10 stuks
28300K	15435156	120 cm	30 stuks

